

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Güç Gereksinimleri	110/ 220-240 VAC (±%10) VAC
Frekans	50-60 Hz
Güç Tüketimi	75W
Dahili DC Batarya	12 VDC
Batarya	12 VDC 26AH kurşun asit jel tip

KUVÖZ ÖZELLİKLERİ

Kuvöz Dış Boyutlar	50.6 (Y) x 53.0 (G) x 102.0 (D) cm
Kuvöz Ağırlığı	40.0 Kg
Yenidoğan Yatak Boyutu	63 (G) x 31.5 (Y) cm (±1cm)
Yatak Kapasitesi	10 Kg
Yatağın Dışarı Çekilme Seviyesi	20 cm
Kuvöz İçi Ses Seviyesi	<49 dB
Kablo ve Hortum Girişleri (Grommets)	5 Adet
Müdehale Kapıları	5 Adet
Hava Filtresi	<0,5 µ

HAVA ve CİLT SICAKLIK KONTROLÜ

Hava Modu Kontrol Aralığı	17°C - 38.9°C
Cilt Modu Kontrol Aralığı	17°C - 38.9°C
Ölçüm Hassasiyeti	0,1°C


OKSİJEN ÖLÇME ARALIĞI (OPSİYONEL)

Oksijen Göstergesi Hassasiyeti	1%
Oksijen Kontrol Doğruluğu	± 5%, 21% Cal
Oksijen Ölçüm Aralığı	15%-99%
Giriş Basınç Aralığı	70psi'ye kadar - 4,8 bar
O2 Sensör Çalışma Sıcaklığı Aralığı	20°C -41 °C

FARKLI OPSİYONEL TAŞIMA STANDLARI



BabyNEST H-100 Transport Kuvöz

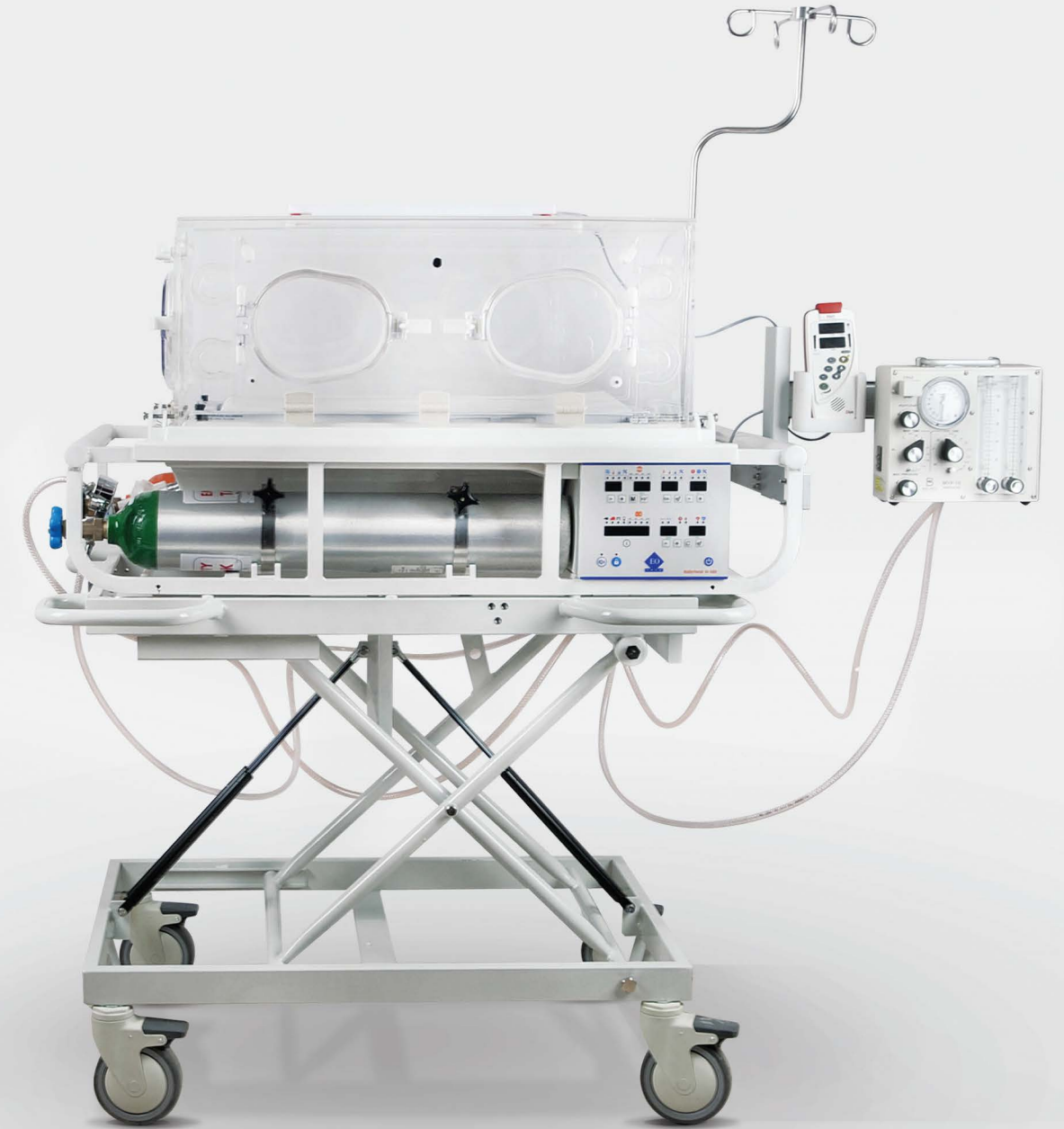

HEAD QUARTERS: Aso 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alçı Mah. 2036. Cad.
No:1 Sincan / Temelli / Ankara / TURKEY
T: +90.312.4334226 W: www.ertuncozcan.com

info@ertuncozcan.com / www.ertuncozcan.com

BabyNEST H-100 Transport Kuvöz

STANDART ÖZELLİKLER

- Microprocessed Kontrol
- Çift Cidar
- Ön ve Yan Erişim
- Boru Delikleri
- Müdehale Kapıları
- Kayar yatak Tepsisi
- Muayene Lambası
- 4 Saat Dahili Batarya
- Cilt Sıcaklığı Probu
- Dijital Gösterge
- Nemlendirme haznesi
- Güç Kablosu
- O2/Hava Silindir Muhafazası
- Serum Askısı
- Güvenlik Kemer
- Bilgi Ekranı
- Gelecek Alarm Kapatma
- Hava Filtrei <0,5µ

SESİ & GÖRSEL ALARMLAR

- Düşük Hava Sıcaklığı
- Yüksek Hava Sıcaklığı
- Hatalı Hava Sensörü
- Düşük Cilt Sıcaklığı
- Yüksek Cilt Sıcaklığı
- Hatalı Cilt Sensörü
- Çıkmış Cilt Sensörü
- Düşük Oksijen Değeri
- Yüksek Oksijen Değeri
- oksijen Sensörü Yok
- Arızalı Oksijen Sensörü
- Düşük SP02 Değeri
- Yüksek SP02 Değeri
- Düşük PR Değeri
- Yüksek PR Değeri
- Düşük Batarya
- Sistem Hatası
- Güç Kesintisi
- Hava Sirkülasyonu Hatası

EK ÖZELLİKLER

- Oksijen Sensörü
- Sedy Platformu
- Taşıma Arabası

TRANSPORT KUVÖZ İÇİN STANDART AKSESUARLAR

- Reusable Cilt probu
- Güç Kablosu
- Monitör Rafı
- Disposable Cilt Probu
- Serum Tutucu
- İris Pencere
- Hava Filtresi
- Nemlendirme Sünger
- Oksijen Tankı
- Muayene Lambası



OKSİJEN ve HAVA TÜPÜ



FRENLİ DÖRT TEKER



TÜP YATAĞI



MUAYENE LAMBASI



MİKROİŞLEMCİ ÜNİTESİ

PEDİATRİK / YENİDOĞAN VENTİLATÖR (OPSİYONEL)

Pediyatrik / Yenidoğan Ventilator, kullanım kolaylığı ve kanıtlanmış güvenilirliği ile tarih boyunca solunum bakım profesyonellerinin gözdesi olmaya devam etmiştir. Çok geniş I/E oranı ayarları ve sürekli % 21 - 100 oksijen akışı sağlayabilme yeteneği ile çok yönlü bir ventilatördür.

STANDART ÖZELLİKLER

- Transport
- Sürekli Akış
- IMV, PEEP, GPAP
- Portable, Kompakt ve Hafif
- Taşıma Sırasında Aksama Olmadan Kullanılabilir
- Kalibre Kontroller
- Gazla Çalışan; Basıncı Tank veya Duvar Çıkışı
- Tehlikeli Bölgelerde Kullanılabilir; Elektriksiz, Şok Tehlikesiz
- Kendi Kendini Temizleme

ÖZELLİKLER

Frekans	2-130 dk.
İnspirasyon Zamanı	0.2 - 2.0 sn.
Ekspirasyon Zamanı	0.25 - 2.5 sn.
IMV Aralığı	2.5 - 30 sn.
I/E Oranı	Değişken
O2	21 - 100%
Tidal Hacim	0 - 666 cc
Akış Hızı	0 - 20 LPM
Maksimum Basınç Aralığı	0 - 70 cmH2O
Hata Sonucu Max. Basınç Aralığı	80 cmH2O
PEEP/CPAP Oranı	0-18cmH2O
Güç Kaynağı	50+/-5 PSI
Gaz Tüketimi	4 LPM (0.14 SCFM)
Akış Ölçer Aralıkları	O2: 0.6 - 10 LPM Hava: 0.6-10 LPM
System Pressure Gauge	10 - 120 cmH2O
Fiziksel Boyutlar	20x23x7.4 cm
Ağırlık	2.3 kg

PULS OKSİMETRE ÖZELLİKLER (OPSİYONEL)

Kullanıcı kalibrasyonu ve hasta iş birliği gerektirmeyen puls oksimetre.

STANDARD FEATURES


- Taşınabilir Şekilde Sürekli İzleme
- Hızlı ve Kolay Kullanım
- Kuvöze Sabit
- Hafif ve Sağlam
- 72 Saat Trend İzleme

SESİ & GÖRSEL ALARMLAR

- Yüksek ve Düşük SpO2 (1% - 99%)
- Yüksek ve Düşük Nabız Oranı (30 - 235 bpm)
- Sensör Hatası
- Sistem Hatası
- Düşük Batarya

PEDİATRİK / YENİDOĞAN VENTİLATÖR İÇİN STANDART AKSESUARLAR

- Tek Kullanımlık Infant Devresi
- 1" Direk Montaj Braketi
- 10' O2 Besleme Hortumu
- 10' Hava Besleme Hortumu
- Test Akciğeri
- Kullanım Klavuzu

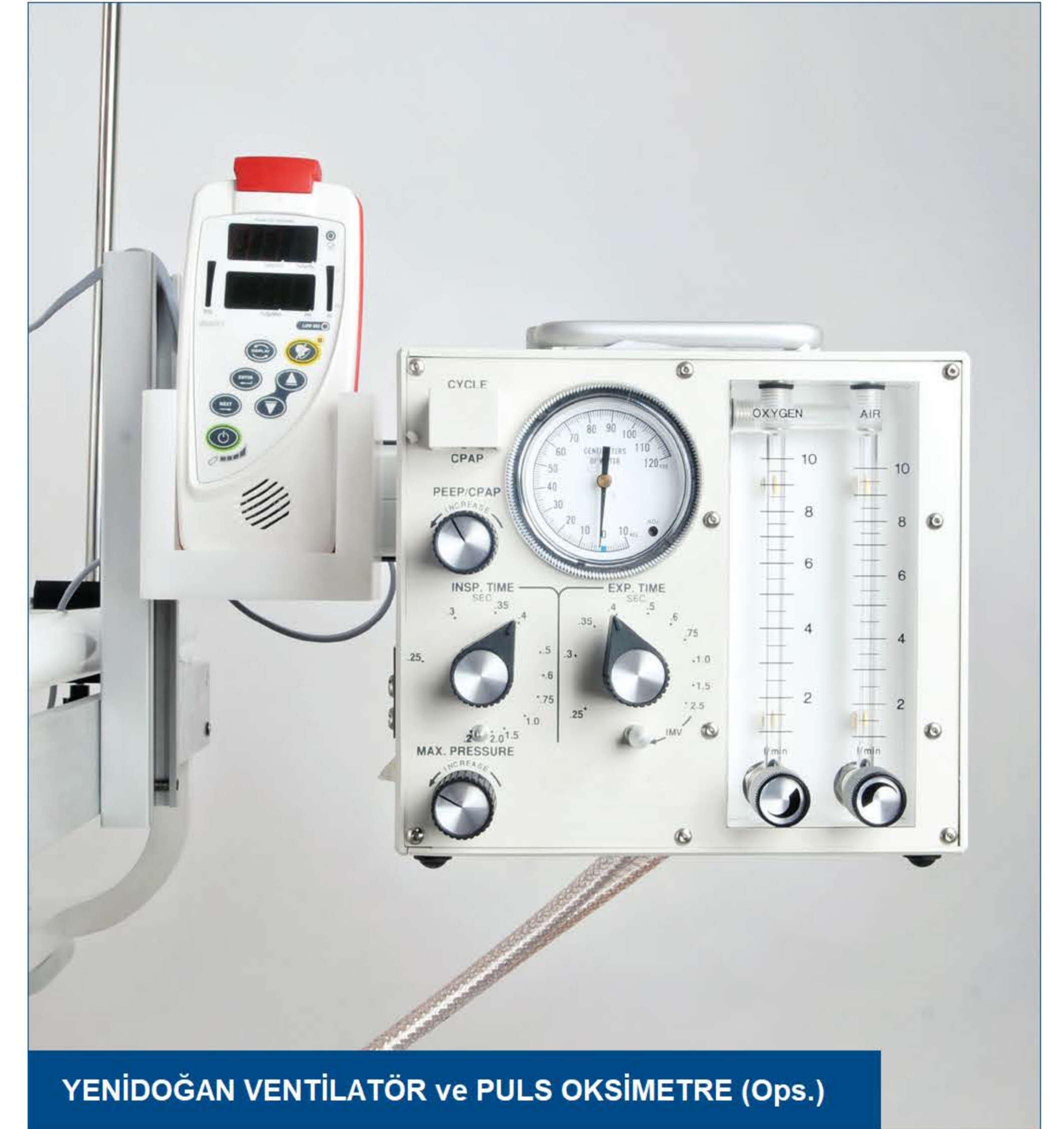

YENİDOĞAN VENTİLATÖR ve PULS OKSİMETRE (Ops.)

ÖLÇÜM ARALIĞI

SpO2	0% - 100%
SpCO	0%- 99%
SpMet	0%- 99.9%
Nabız Oranı	25-240 (bpm)

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER (BATARYA)

Tip	4AA Alkalin
Kapasite	8 Saat Üzeri