



ERTUNÇ ÖZCAN

MAGIC LOGGIA M MODEL





Profesyonel Çözüm Ortağınız...



GELİŞTİRİLMİŞ TASARIM

GELİŞTİRİLMİŞ TASARIM

Magic Loggia M Model kuvöz;

Tasarımında kullanılan hammadde kimyasal boya içermemektedir.

Bebek üzerinde ses stresi en aza indirilmiştir.

Ayarlanan değere hızlı ulaşan Servo kontrollü nem ve oksijen sistemine sahiptir.

Kompakt yapısı ile kolaylıkla hareket edebilir.





KUSURSUZ TEKNOLOJİ

- 1) Çift cidarlı ve ikiz bebeklere uygun geniş yataklı kabin
- 2) Mekanik kontrol edilebilen trendelenburg ve ters trendelenburg mekanizması
- 3) Kabinin ön ve/veya arka tarafında aşağı doğru 180° açılabilen çift cidarlı kapak sistemi
- 4) Kabinde aksesuar kullanımı için kendiliğinden kapanan 10 adet giriş
- 5) Dirsek teması ile kolayca açılabilir 6 adet müdahale penceresi
- 6) X-Ray kaset tepsisi
- 7) Distile su haznesi
- 8) Grafik LCD ekran ve kontrol ünitesi

BEBEK ÜZERİNDE MİNİMUM SES STRESİ

BEBEK ÜZERİNDE MİNİMUM SES STRESİ

Kabin içerisinde ses düzeyi en aza indirilmiştir.



MİNİMUM SES STRESİ



SENSÖR MODÜL ÜNİTESİ

SENSÖR MODÜL ÜNİTESİ

Magic Loggia kuvözler, kabin içerisine kolayca yerleştirilebilen ve tüm parametreleri ölçüp tek kablo kullanarak kontrol paneli ile haberleşmeyi sağlayan sensör modül teknolojisine sahiptir. Bu sayede, kabin içerisinde ölçümleme için kullanılan kablo karmaşası ve aşınması önlenmiş olur.

Sensör modül sistemi, kuvöz içi hava sıcaklık sensörü, nem sensörü, 2 adet oksijen sensörü, 1. cilt sıcaklık probu girişi, 2. cilt sıcaklık probu girişi, dahili terazi bağlantı girişi ve alarm indikatörü içermektedir.

GELİŞMİŞ ISI YÖNETİMİ

GELİŞMİŞ ISI YÖNETİMİ

GELİŞMİŞ ISI YÖNETİMİ

Kabin ünitesinde ısı kaybını önlemek için ön ve/veya arka kapak açıldığında otomatik olarak devreye giren hava perdeleri mevcuttur.

Servo kontrollü ısıtıcı modül ile dijital olarak sıcaklık kontrolü sağlanıp, hava ve cilt modu kontrolleri yapılmaktadır.



ENFEKSİYON RİSKİNE KARŞI MAKSİMUM KORUMA

MİKRO FİLTRE SİSTEMİ

Magic Loggia kuvözler, hava girişindeki partikülleri tutan mikro filtreye sahiptir.

KONTROL PANELİ


KONTROL PANELİ

Magic Loggia M model kuvözler aşağıdaki ekran ve monitörizasyon özelliklerine sahiptir.

- 6 " (inch) büyüklüğünde entegre LCD grafik ekran,
- Bebeğin ağırlık kazancının ya da kaybının ekran üzerinde sürekli izlenebilmesi,
- Nem, oksijen, hava ve cilt ısısı ölçülen ve ayarlanan değerleri, ikinci cilt ısı ölçümlerinin aynı anda izlenebilmesi,
- İkiz bebek cilt ısılarını aynı anda ölçüp izlenebilme özelliği.

MONİTÖRİZE EDİLEN PARAMETRELER

- Çalışılan modda ayarlanan sıcaklık değeri
- Ölçülen oksijen oranı
- Ölçülen hava sıcaklığı
- Alarmlar
- Ölçülen cilt1 sıcaklığı
- Saat - tarih
- Ölçülen cilt2 sıcaklığı (opsiyonel)
- Bebeğin ağırlığının sürekli izlenebilmesi
- Ayarlanan nem oranı
- Trendler
- Ölçülen nem oranı
- Ayarlanan oksijen oranı

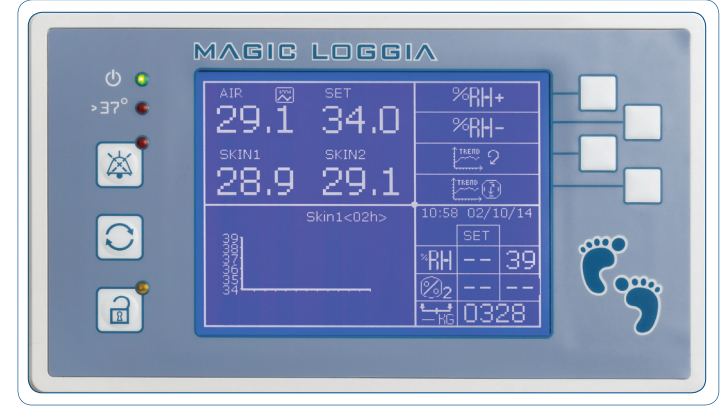

SERVO KONTROLLÜ NEMLENDİRİCİ ÜNİTESİ

SERVO KONTROLLÜ NEMLENDİRİCİ ÜNİTESİ

- Distile su dolum haznesi ve ayarlanan değere hızlı ulaşan Servo kontrollü nem sistemi
- Steril edilebilir distile su haznesi ve homojen nemlendirme sistemi





360° DÖNEBİLEN ÇEKMECELER (OPSİYONEL)

360° DÖNEBİLEN ÇEKMECELER (OPSİYONEL)



KİLİTLENEBİLİR 4 ADET TEKERLEK

KİLİTLENEBİLİR 4 ADET TEKERLEK

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Kuvöz Boyutları	: 142 (Y) x 103 (G) x 73 (D) cm
Kuvöz Ağırlığı	: ~100 Kg

KABİN ÖZELLİKLERİ

Acil Müdahale Penceresi	: 6 Adet
Kablo ve Hortum Girişi	: 10 Adet
Hava Filtresi	: <0,5 µ
Kabin İçi Gürültü Düzeyi	: ≤42dBA
Kabin İçi Hava Akım Hızı	: <10 cm/sn

YATAK ÖZELLİKLERİ

Yatak Tepsisi Boyutları	: 80 cm x 40 cm
Yatak Eğimi (Trendelenburg)	: 0° ile 12° arasında

SICAKLIK KONTROL MODLARI

Hava Sıcaklığı Ve Cilt Sıcaklığı Kontrol Modları,

Hava Sıcaklığı Modu Kontrol Aralığı	: 19,9°C – 37°C
Hava Sıcaklığı Aşma Aralığı	: 37°C – 39°C
Cilt Sıcaklığı Modu Kontrol Aralığı	: 33,9°C – 37°C
Cilt Sıcaklığı Aşma Aralığı	: 37°C – 38°C

SERVO KONTROLLÜ OKSİJEN MODÜLÜ (OPSİYONEL)

Oksijen Konsantrasyon Ayarı	: %21 – %85
Oksijen Görüntüleme Duyarlılığı	: %1
Oksijen Kontrol Doğruluğu	: ± %5, %21 Cal'de
Oksijen Ölçüm Aralığı	: %15 – %99

SERVO KONTROLLÜ NEM ÜNİTESİ

Nem Fonksiyon Kontrol Aralığı	: %20 – %95 (Ekran'da gösterim aralığı: %15- %99)
Nem Kontrol Doğruluğu	: ± %5
Maksimum Nem	: >%90 (Kuvöz içi set sıcaklığı: 39° C iken)

TREND PARAMETRELERİ VE SÜRESİ

Grafiksel ve Nümerik Trendler

- Hava Sıcaklığı (2, 4, 8, 12, 24, 48, 72 saat)
- Cilt-1 Sıcaklığı (2, 4, 8, 12, 24, 48, 72 saat)
- Cilt-2 Sıcaklığı (2, 4, 8, 12, 24, 48, 72 saat)
- Nem Oranı (2, 4, 8, 12, 24, 48, 72 saat)
- Oksijen Konsantrasyonu (2, 4, 8, 12, 24, 48, 72 saat)
- Ağırlık (1, 2, 4, 6, 12, 24, 36 gün)
- Isıtıcı Gücü (2, 4, 8, 12, 24, 48, 72 saat)

TERAZİ ÖZELLİKLERİ (OPSİYONEL)

Tartı Fonksiyon Aralığı	: 0 – 9999 gr
Tartı Görüntüleme Duyarlılığı	: 1 gr

ALARMLAR

- Yüksek Hava Sıcaklığı
- Düşük Hava Sıcaklığı
- Yüksek Cilt Sıcaklığı
- Düşük Cilt Sıcaklığı
- Yüksek Nem Oranı
- Düşük Nem Oranı
- Yüksek Oksijen Miktarı
- Düşük Oksijen Miktarı
- Nemlendirme Kabında Su Yok
- Düşük Batarya
- Sensör Modül Yok
- Güç Kesintisi Arızası
- Nem Sensör Arızası
- Cilt Sensörü Bozuk
- Fan Arızası

SİSTEM KONTROLÜ

- Mikro İşlemci Kontrollü ve İlk Açılışta Kendini Test Edebilme Özelliği
- Tuş Kilidi
- Alarm Susturma Butonu
- PC Bağlantısı (Opsiyonel)

DİL SEÇENEĞİ

Türkçe ve İngilizce

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER:

Güç Gereksinimleri	: 220 (± %10)VAC
Frekans	: 50/60 Hz
Dahili Batarya	: Elektrik kesintisi halinde, sadece verilerin görüntülenmesi 60 dakika boyunca devam eder.

MAGIC LOGGIA M MODEL KUVÖZ

MAGIC LOGGIA M MODEL KUVÖZ

STANDART AKSESUARLAR

- Çok Kullanımlık Cilt Sıcaklık Probu
- Hava Filtresi
- X-Ray Kaset Tepsisi
- Steril Edilebilir Nemlendirme Haznesi

OPSİYONEL AKSESUARLAR VE ÖZELLİKLER

- Monitör Rafı
- Serum Askısı
- Aspirasyon Ünitesi
- Yatak Altı Entegre Dijital Terazı
- Flowmetre Ünitesi
- Tek Kullanımlık Cilt Sıcaklık Probu
- Elektronik Kontrol Edilebilen, Titreşimsiz ve Sessiz Çalışan Geliştirilmiş Yükseklik Ayarı (<50db)
- 360° Dönebilen Çekmece (Sağ ve/veya Sol Tarafta)
- Servo Kontrollü Oksijen Sistemi
- Çift Cidar
- Aşağı Doğru 180° Açılabilen Arka Kapak


STANDARTLARA UYGUNLUK

STANDARTLARA UYGUNLUK

EN60601-1
EN60601-2-19

NOTLAR

NOTLAR

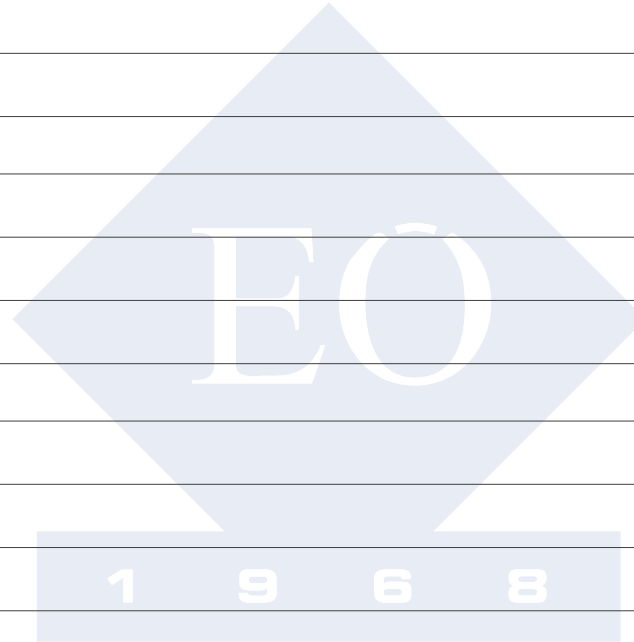



ERTUNÇ ÖZCAN

ANKARA (Merkez)

Adres : Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 266,
Tepe Prime Plaza, A Blok Kat: 5 06800 Çankaya / Ankara
Tel : +90 (312) 433 42 26
Faks : +90 (312) 431 91 22

ANKARA (Fabrika)

Adres : ASO 2-3 OSB. 2036.Cad. No:1
Sincan / Temelli / Ankara
Tel : +90 (312) 641 41 34 (PBX)
Faks : +90 (312) 641 40 06

İstanbul

Adres : Molla Gürani Mah. Mürettip Sok. No:8/A 34093 Fatih / İstanbul
Tel : +90 (212) 533 02 04
Faks : +90 (212) 532 98 97

İzmir

Adres : 46. Sok. No: 23 Daire 1 Çağla Apartmanı Üçkuyular / İzmir
Tel : +90 (232) 248 35 00
Faks : +90 (232) 248 35 01

Antalya

Adres : Kuşkavağı Mah. 543. Sok. Kumsal Apartmanı No: 10/1 Konyaaltı / Antalya
Tel : +90 (242) 228 16 50
Faks : +90 (242) 228 17 50

Gaziantep

Adres : Osmangazi Mah. A. Kadir Aksu Bulvarı Tuğçe Sitesi B Blok No:178 Gaziantep
Tel : +90 (342) 360 79 71
Faks : +90 (342) 360 79 72